



[EN] Consumer Information

A full contact flexible wound dressing for the management of dry skin and cutaneous rashes.

StrataCTX is a semi-occlusive, self-drying and transparent gel. StrataCTX may be directly applied to dry skin, open wounds and compromised or desquamating skin surfaces, including cutaneous rashes. StrataCTX gel is bacteriostatic and inert. It contains no alcohols, parabens or fragrances.

How StrataCTX works

When used as directed StrataCTX dries to form a protective layer that is gas permeable and waterproof which hydrates and protects compromised skin areas and superficial wounds from chemical and microbial invasion. StrataCTX is a self-drying, non-sticky gel formulation that lightly bonds to the most superficial damaging skin layer. StrataCTX helps to promote a moist healing environment for wounds or compromised skin. This moist wound healing environment promotes faster re-epithelialization and significantly reduces the skin's acute inflammatory response.


Intended use

StrataCTX is used to relieve low grade inflammatory changes such as dry, itching, flaking, peeling and irritated skin. For more severe inflammatory changes, StrataCTX reduces pain, redness and heat sensation. StrataCTX was developed for use on all types of wounds, toxic and compromised skin including:

- Cutaneous reactions
- Pruritic, itchy skin
- Xerotic, dry skin
- Desquamation
- Fissures of skin and nail folds
- Blisters
- Medical Adhesive-Related Skin Injuries (MARS)
- Erythema
- Infusion reactions
- Rashes, including: Maculopapular rash, hand-foot syndrome, GVHD, acneiform reaction, peri – and appendageal (hair follicles, sweat glands)

StrataCTX can be used with or without a secondary protective dressing. StrataCTX is suitable for children and people with sensitive skin. StrataCTX is intended for single patient use. StrataCTX is ideal for large surface areas and contoured skin like head, face, hand and foot, as well as joints and hairy areas without the need for shaving. StrataCTX is transparent allowing users to monitor therapy progress without removal of the dressing.

Directions for use

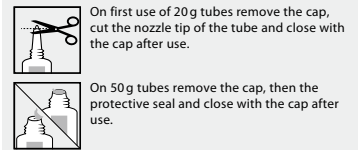

Ensure that the affected superficial area is clean and dry. Apply a very thin layer of StrataCTX directly to the affected area and allow the gel to dry. StrataCTX should be applied at least twice daily to affected areas, as needed or as advised by your physician. Once dry, StrataCTX may be covered by sunscreen, cosmetics and clothing. For best results StrataCTX should be maintained in continuous contact with the skin (24 hours a day/7 days a week). When applied correctly to exposed areas, StrataCTX should be dry in 5–6 minutes. If it takes longer to dry you have probably applied too much. Gently remove the excess with a clean tissue or gauze and allow the drying process to continue.

Recommended duration of treatment

StrataCTX is recommended as treatment following the first signs or symptoms on the skin and should be applied until resolved (24 hours a day/7 days a week) or until no further improvement is seen.

How much StrataCTX do I need?

StrataCTX gel is an advanced formulation that requires substantially less product per application than typical moisturizing creams or barrier ointments. A little bit goes a long way.

- **StrataCTX 20g (0.70 oz)** is enough to treat an area of 36 x 15 cm, (14 x 6 inch) twice per day for over 10 days.
- **StrataCTX 50g (1.75 oz)** is enough to treat an area of 36 x 15 cm, (14 x 6 inch) twice per day for over 25 days.

Cautions

- For external use only.
- StrataCTX should not be placed in contact with the eyes.
- StrataCTX should not be applied over topical medications unless advised by your physician.
- StrataCTX may stain clothing if not completely dry. If staining occurs, dry cleaning should be able to remove it without damaging the fabric.
- For correct storage please reclose the tube tightly with the cap.
- Should your cutaneous reaction show signs of infection or failure to heal, immediately consult your physician.
- If irritation occurs, discontinue use and consult your physician.

- Not suitable for highly exudative wounds, tunneling wounds or 3rd degree burns.
- Keep out of the reach of children.
- Do not use after the expiration (EXP) date printed on the tube. The expiration (EXP) date does not change once the tube has been opened.
- Do not use if the tube is damaged.

STERILE UNTIL OPENED

Ingredients: Polydimethylsiloxanes, siloxanes, alkylmethyl silicones

[DE] Verbraucherinformation

Flexible Wundauflage mit vollflächigem Kontakt zur Haut für das Management trockener Haut und Hautausschlägen.

StrataCTX ist ein semi-okklusives, selbst trocknendes, transparentes Gel. StrataCTX kann auf trockene Haut, offene Wunden, geschwächte oder desquamative Hautflächen, inklusive Hautausschlägen aufgetragen werden. StrataCTX Gel ist bakteriostatisch und inert. Es enthält weder Alkohol noch Duftzusätze oder Parabene.

Wie StrataCTX wirkt

Bei ordnungsgemäßer Anwendung bildet StrataCTX nach dem Trocknen eine Schutzschicht, die sowohl gasdurchlässig als auch wasserundurchlässig ist. So werden beeinträchtigte Hautstellen und offene Wunden mit Feuchtigkeit versorgt und vor chemischen und mikrobiologischen Verunreinigungen geschützt. StrataCTX ist ein selbsttrocknendes, nicht klebendes Gel, das sich leicht an die geschädigte Hautoberfläche bindet. StrataCTX begünstigt eine feuchte Wundheilungsumgebung für Wunden und geschwächte Haut. Diese feuchte Wundheilungsumgebung fördert eine schnellere Epithelneubildung und reduziert die akute Entzündungsreaktion der Haut.


Anwendungszweck

StrataCTX wird angewendet um leichte Entzündungsreaktionen wie Trockenheit, Juckreiz, Abschuppung, Hautabschälungen und gereizte Haut zu lindern. Bei stärkeren Entzündungsreaktionen reduziert StrataCTX Schmerz, Rötungen und Hitzeempfindung. StrataCTX wurde für den Gebrauch für alle Arten von Wunden und geschwächter Haut entwickelt:

- Hautreaktionen
- Pruriginöse Haut
- Xerotische, trockene Haut
- Desquamation
- Nagelfalz- und Hautfaltenfissuren
- Blasen
- Durch medizinische Klebstoffe bedingte Hautverletzungen
- Erythem
- Infusionsreaktionen
- Ausschläge inkl.: Makulopapulöser Hautausschlag, Hand-Fuß-Syndrom, GVHD, akneiforme Reaktionen, Hautanhangsgebilde inkl. Umgebung (Haarfollikel, Schweißdrüsen)

StrataCTX kann mit oder ohne sekundärem Schutzverband verwendet werden. StrataCTX ist für die Anwendung bei Kindern und Personen mit empfindlicher Haut geeignet. StrataCTX ist für eine Einpatientenbehandlung bestimmt. StrataCTX eignet sich ideal für große und unebene Hautoberflächen wie Kopf, Gesicht, Hände und Füße, sowie für Gelenke und behaarte Hautstellen, ohne diese vorher rasieren zu müssen. StrataCTX ist transparent. Der Verwender kann somit den Therapiefortschritt überwachen, ohne die Wundauflage entfernen zu müssen.

Anwendungshinweise

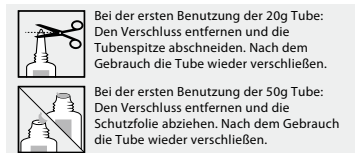

Es muss sichergestellt werden, dass die betroffene Hautstelle sauber und trocken ist. StrataCTX sehr dünn auf die betroffene Hautstelle auftragen und das Gel trocknen lassen. StrataCTX sollte mindestens zweimal täglich, nach Bedarf oder wie von Ihrem Arzt verordnet auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen werden. Nach dem Trocknen können auf StrataCTX Sonnencremes oder Kosmetika aufgetragen, sowie Kleidung angezogen werden. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn StrataCTX dauerhaft mit der Haut in Kontakt ist (24h/Tag, 7 Tage/Woche). Bei ordnungsgemäßer Anwendung auf den betroffenen Stellen sollte StrataCTX innerhalb von 5–6 Minuten getrocknet sein. Sollte die Trockenzeit überschritten werden, wurde ggf. zu viel Gel aufgetragen. Den Überschuss vorsichtig mit einem sauberen Tuch oder Gazestück abtupfen und das verbleibende Gel weiter trocknen lassen.

Empfohlene Anwendungsdauer

StrataCTX wird als Behandlung nach dem Auftreten erster Symptome empfohlen.

Die Anwendung sollte bis zur vollständigen Heilung fortgesetzt werden (24h/Tag, 7 Tage/Woche), oder bis keine weitere Verbesserung mehr sichtbar ist.

Empfohlene Packungsgröße

StrataCTX Gel ist eine einzigartige Rezeptur, die erheblich weniger Produkt pro Anwendung benötigt als typische Feuchtigkeitscremes oder Wundsalben. Eine kleine Menge reicht für lange Zeit.

- **StrataCTX 20g** ist ausreichend, um eine Fläche von 36x15 cm weimal täglich für die Dauer von 10 Tagen zu behandeln.

- **StrataCTX 50g** ist ausreichend, um eine Fläche von 36x15 cm zweimal täglich für die Dauer von 25 Tagen zu behandeln.

Warnhinweise

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- StrataCTX sollte nicht mit den Augen in Kontakt gebracht werden.
- StrataCTX darf nicht ohne vorherige ärztliche Rücksprache auf andere Mittel zur Hautbehandlung aufgetragen werden.
- Wenn StrataCTX noch nicht vollständig getrocknet ist, kann es Flecken auf der Kleidung verursachen. Im Falle einer Verunreinigung entfernt eine chemische Reinigung die Flecken ohne den Stoff zu beschädigen.
- Für eine korrekte Aufbewahrung die Tube fest mit der Verschlusskappe verschließen.
- Sollte Ihre Wunde Infektionszeichen aufweisen oder nicht heilen, konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Sollten Hautreizungen auftreten, brechen Sie die Behandlung ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Nicht geeignet bei stark exsudierenden und tunnelförmigen Wunden oder Verbrennungen dritten Grades.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach dem auf der Tube angegebenen Verfallsdatum (EXP) nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum ändert sich nach dem Öffnen der Tube nicht.
- Nicht verwenden, wenn die Tube beschädigt ist.

STERIL WENN UNGEÖFFNET

Wirkstoffe: Polydimethylsiloxane, Siloxane, Alkylmethylsilikone

[FR] Informations consommateurs

Un pansement filmogène souple pour la gestion de la peau sèche et éruptions cutanées

StrataCTX est semi-occlusif, à séchage automatique et transparent. Peut être appliqué directement sur peau sèche, plaies ouvertes, parties abîmées ou desquamées de la peau notamment les éruptions cutanées. StrataCTX est bactériostatique et inerte. Ne contient ni alcool, ni parabens, ni parfums.

Mode d'action de StrataCTX

Si les consignes d'utilisation sont scrupuleusement suivies, StrataCTX forme, après séchage, une couche protectrice qui est à la fois imperméable à l'eau et perméable au gaz. Cette pellicule protège et hydrate les parties abîmées de la peau et les plaies superficielles. StrataCTX est un gel, non collant, à séchage autonome, n'adhère que légèrement à la couche externe la plus endommagée de la peau. StrataCTX produit un environnement humide facilitant la cicatrisation de plaies et peaux endommagées, et environnement humide est idéal pour promouvoir une ré-épithélialisation rapide de la peau. De plus, il permet de réduire les signes aigus d'inflammations.


Mode d'administration

StrataCTX est utilisé pour soulager les signes inflammatoires cutanés légers comme sécheresses, démangeaisons, irritations, éruptions cutanées, et/ou les pelades. Pour des signes inflammatoires plus graves, StrataCTX soulage la douleur, réduit les rougeurs et sensations de chaleur. StrataCTX est conçu pour être utilisé sur tout type de plaie et lésions de la peau comme:

- Réactions cutanées
- Peau prurigineuse (démangeaisons)
- Peau sèche et xérotique
- Desquamation
- Fissures de la peau et plis des ongles
- Ampoules
- Lésions cutanées liées à l'adhésif médical
- Erythèmes
- Réactions à la perfusion
- Éruptions cutanées: Eruption maculopapuleuse, Syndrome palmo-plantaire, RGCH, Réaction acnéiforme, Glandes sudoripares et apocriines (follicules pileux, transpiration)

StrataCTX peut être utilisé avec ou sans pansement secondaire. StrataCTX convient aux enfants, ainsi qu'aux personnes à peau sensible. Chaque tube de StrataCTX est à usage individuel. StrataCTX est idéal pour de large surface ainsi que les contours de la peau comme; la tête, le visage, les mains, pieds, les jointures, les zones pilaires sans nécessitant une épilation. StrataCTX est transparent permettant aux utilisateurs de suivre la progression du traitement sans retirer le pansement.

Mode d'emploi

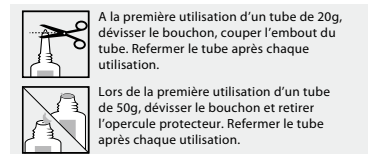

Avant toutes applications s'assurer que la plaie ou la zone à traiter est propre et sèche. Appliquer une fine couche de StrataCTX sur la zone concernée et laisser sécher. StrataCTX devrait être utilisé au moins 2 fois par jour. La dose doit être adaptée selon vos besoins ou suivant la prescription du médecin. Une fois que le gel est sec, StrataCTX peut être recouvert de crème solaire, de produits cosmétiques et vêtements. Pour de meilleurs résultats, StrataCTX doit être maintenu en contact permanent avec la peau (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). Si correctement appliqué, StrataCTX sèche en 5 à 6 minutes. Dans le cas contraire trop de produit a été appliqué : retirer le surplus à l'aide d'un linge propre ou d'une compresse, et laissez sécher.

Durée de traitement recommandée

Il est souhaité d'utiliser StrataCTX dès les premiers symptômes sur la peau et devrait être appliqué jusqu'à disparition de ces symptômes. (24 heures/7 jours) ou jusqu'à ce qu'il n'y est plus d'amélioration visible.

De combien de StrataCTX ai-je besoin ?

La formule spécifique de StrataCTX permet d'appliquer moins de produit par rapport à une crème hydratante ou une pommade cicatrisante traditionnelle pour une même surface.

- **StrataCTX 20g** suffit pour traiter une surface de 36x15 cm, à raison de deux applications par jour pendant une durée minimum de 10 jours.
- **StrataCTX 50g** suffit pour traiter une surface de 36x15 cm, à raison de deux applications par jour pendant une durée minimum de 25 jours.

Mise en garde

- Usage externe uniquement.
- StrataCTX ne doit pas être en contact avec les yeux.
- Ne pas utiliser StrataCTX sur d'autres traitements topiques, sans un avis médical préalable.
- En cas de séchage incomplet StrataCTX est susceptible de tâcher les vêtements. Dans ce cas un nettoyage à sec permettra de la retirer sans endommager les vêtements.
- Pour une meilleure conservation, bien refermer le tube après utilisation.
- Si les réactions cutanées semblent s'infecter ou ne pas guérir, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- En cas de démangeaisons, interrompre le traitement et consulter votre médecin traitant.
- Ne convient pas pour les plaies très exsudatives, béantes ou les brûlures du 3^{ème} degré.
- A conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration (EXP) qui figure sur le tube. Une fois le tube ouvert, la date d'expiration (EXP) ne change pas.
- Ne pas utiliser si le tube est endommagé.

STÉRILE JUSQU'À OUVERTURE

Ingrédients : Polydimethylsiloxanes, siloxanes, alkylmethyl silicones

[IT] Informazioni per il consumatore

Una medicazione di contatto flessibile usata per la gestione di pelle secca e rash cutanei.

StrataCTX è un gel semi-occlusivo, autoasciugante e trasparente. StrataCTX può essere direttamente applicato su pelle secca, ferite aperte e superfici cutanee compromesse e desquamate, incluso rash cutanei. StrataCTX gel è batteriostatico ed inerte. Non contiene alcol, parabeni o fragranze.

Come funziona StrataCTX

Se utilizzato come indicato, StrataCTX si asciuga in modo da formare uno strato di protezione che è permeabile ai gas e impermeabile all'acqua e che idrata e protegge le aree epidermiche compromesse e le ferite superficiali da invasioni chimiche e microbiche. StrataCTX è una formulazione in gel autoasciugante e non appiccicosa che aderisce delicatamente allo strato più superficiale di pelle danneggiata. StrataCTX aiuta a promuovere un ambiente umido per la guarigione di ferite o di pelle compromessa. L'ambiente umido per la guarigione della ferita favorisce una ripitelizzazione più veloce e riduce significativamente la risposta infiammatoria acuta della pelle.


Uso previsto

StrataCTX è usato per alleviare stati infiammatori lievi, come pelle secca, pruriginosa, desquamata, spellata e irritata. Per stati infiammatori più severi, StrataCTX riduce dolore, rossore, sensazione di calore ed aiuta a lenire le aree esposte della pelle. StrataCTX è stato sviluppato per l'uso su tutti i tipi di ferite e pelle compromessa, incluso:

- Reazioni cutanee
- Pelle pruriginosa ed urticante
- Pelle secca e xerotica
- Desquamazione
- Ragadi della pelle o attorno alle unghie
- Vesciche
- Lesioni cutanee correlate agli adesivi medicali
- Eritema
- Reazioni all'infusione
- Rash cutanei, incluso: Esantema maculo papulare, Sindrome mano-piede, Malattia del trapianto contro l'ospite, Eruzione acneiforme, Annessi cutanei (follicoli piliferi, ghiandole sebacee)

StrataCTX può essere usato con o senza un rivestimento protettivo secondario. StrataCTX è adatto a bambini e a persone con pelle sensibile. StrataCTX è pensato per l'utilizzo da parte di un solo paziente. StrataCTX è ideale per aree superficiali estese e per la pelle sagomata, come testa, viso, mani e piedi, così come per articolazioni e aree pilifere senza bisogno di rasatura. StrataCTX è trasparente, permettendo al paziente di monitorare il progresso della terapia senza la rimozione del rivestimento protettivo.

Istruzioni per l'uso

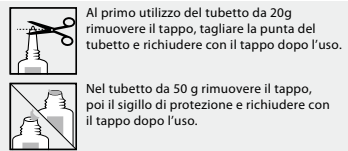

Assicurarsi che l'area superficiale interessata sia pulita ed asciutta. Applicare uno strato molto sottile di StrataCTX direttamente sull'area interessata e permettere al gel di

asciugare. StrataCTX deve essere applicato almeno due volte al giorno sulle aree interessate, a seconda del bisogno o come indicato dal medico. Una volta asciutto, StrataCTX può essere coperto da creme solari, cosmetici o indumenti. Per migliori risultati StrataCTX dovrebbe essere mantenuto in continuo contatto con la pelle (24 ore al giorno/7 giorni alla settimana). Se applicato correttamente, StrataCTX dovrebbe asciugare in 5-6 minuti. Se impiega più tempo ad asciugare, ne è stata probabilmente applicata una quantità eccessiva. Rimuovere delicatamente la quantità in eccesso con un fazzoletto pulito o una garza e lasciar continuare il processo di asciugatura.

Durata raccomandata del trattamento

StrataCTX è raccomandato come trattamento a seguito dei primi segni o sintomi sulla pelle e deve essere applicato fino alla risoluzione dei medesimi (24 ore al giorno/7 giorni alla settimana) o fino a che non si riscontrano alcun ulteriore miglioramento.

Quanto StrataCTX va applicato?

StrataCTX gel è una formulazione unica che richiede sostanzialmente una minor quantità di prodotto per applicazione rispetto alle creme idratanti o agli unguenti di barriera. Una piccola quantità copre una vasta area.

- **StrataCTX 20g** è sufficiente per trattare un'area di 36x15 cm due volte al giorno per oltre 10 giorni.
- **StrataCTX 50g** è sufficiente per trattare un'area di 36x15 cm due volte al giorno per oltre 25 giorni.

Avvertenze

- Solo per uso esterno.
- Evitare il contatto di StrataCTX con gli occhi.
- StrataCTX non dovrebbe essere applicato su altri trattamenti topici senza il parere del medico.
- StrataCTX può macchiare gli abiti se non completamente asciutto. In caso di macchia, il lavaggio a secco dovrebbe essere in grado di rimuoverla senza danneggiare il tessuto.
- Per una corretta conservazione richiudere bene il tubetto con il tappo.
- Nel caso in cui la sua reazione cutanea mostrasse segni di infezione o non riuscisse a guarire, immediatamente consultare il medico.
- In caso di irritazione, interrompere l'uso e consultare il medico.
- Non adatto a ferite altamente essudative o sottocutanee o ad ustioni di terzo grado.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare dopo la data di scadenza (EXP) indicata sulla confezione. La data di scadenza (EXP) non cambia una volta che il tubetto è stato aperto.
- Non usare il tubetto se è danneggiato.

STERILE FINO ALL'APERTURA

Ingrédients: Polidimetilsilossani, Silossani, Alchilmetil Silicioni

[ES] Información para el consumidor

Un apósito flexible y de pleno contacto para el manejo de la piel seca y las erupciones cutáneas.

StrataCTX es un gel semi-occlusivo, auto secante y transparente. StrataCTX puede aplicarse directamente sobre piel seca, heridas abiertas, superficies de piel comprometida o en descamación, incluyendo erupciones cutáneas. StrataCTX gel es bacteriostático e inerte. No contiene alcoholes, parabenos o fragancias.

Cómo funciona StrataCTX

Cuando es aplicado directamente sobre la zona afectada, StrataCTX se seca para formar una película permeable al gas e impermeable al agua, que hidrata y protege las áreas de piel comprometida o con heridas superficiales, de posibles invasiones químicas o microbianas. StrataCTX es una formulación de gel auto secante, no pegajoso, que se une ligeramente con la capa dañada más superficial de la piel. StrataCTX ayuda a promover un ambiente de curación húmedo para heridas o piel comprometida. Este ambiente de curación húmedo promueve una repitelización más rápida mientras reduce significativamente la respuesta inflamatoria aguda de la piel.

Uso previsto

StrataCTX se emplea para aliviar los efectos inflamatorios de bajo grado como la sequedad, el picor, la descamación y la irritación. En casos de efectos inflamatorios más severos, StrataCTX reduce el dolor, la rojez y el calor. StrataCTX fue desarrollado para su uso sobre todos los tipos de heridas y piel comprometida incluyendo:

- Reacciones cutáneas
- Piel prurítica, con picor
- Piel xerótica, seca
- Descamación
- Fisuras en la piel o en los pliegues ungulares
- Ampollas
- Daño a la piel relacionado con adhesivos de uso sanitario
- Eritema
- Reacciones a la infusión
- Erupciones, incluyendo: Erupción maculopapular, Sindrome mano-pie, Enfermedad de injerto-contra-huésped, Reacción acneiforme, Peri - y apendiculares (folículos capilares, glándulas sebáceas)

StrataCTX puede utilizarse con o sin un apósito secundario de protección. StrataCTX es adecuado para su uso en niños y para personas con pieles sensibles. StrataCTX está previsto para el uso de un solo paciente. StrataCTX es ideal para el uso sobre áreas grandes y contorneadas como el pecho, la cara, la espalda, el área pélvica, o las articulaciones. No es necesario afeitar aquellas zonas con mucho vello. StrataCTX es transparente, lo que permite a los usuarios monitorizar el progreso de la terapia sin necesidad de retirar el apósito.

Instrucciones de uso



En el primer uso de los tubos de 20g retire la tapa, corte la punta de la boquilla del tubo y cierre con la tapa después del uso.



En los tubos de 50g retire la tapa, luego el sello protector y cierre con la tapa después de su uso.

Compruebe que la piel afectada o la herida superficial esté limpia y seca. Aplique una capa muy fina de StrataCTX directamente sobre el área afectada y permita el secado del gel. StrataCTX debe aplicarse sobre las áreas afectadas una o dos veces diarias, según sea necesario o según recomendación médica. Una vez seco, StrataCTX puede cubrirse con cremas solares, cosméticos y ropa. Para obtener los mejores resultados, StrataCTX debe mantenerse en contacto continuo con la piel (24 horas al día/7 días a la semana). Si se aplica correctamente sobre las áreas afectadas, StrataCTX debe secar en 5-6 minutos. Si necesita más tiempo para secar, probablemente haya aplicado demasiado gel. Retire delicadamente el exceso con un pañuelo o gasa limpios, y permita la continuación del proceso de secado.

Duración recomendada del tratamiento

Se recomienda el uso de StrataCTX como tratamiento tras los primeros signos o síntomas sobre la piel y debe mantenerse el uso hasta que éstos se resuelvan (24 horas al día, 7 días a la semana), o hasta que no se observe ninguna mejora.

¿Cuánto StrataCTX necesito?

StrataCTX es un gel con una formulación única que requiere substancialmente menos producto por cada aplicación que las típicas cremas hidratantes o los unguentos de efecto barrera. Un poco volumen alcanza para mucha superficie.

- **StrataCTX 20g** es suficiente para tratar un área de 36x15cm, dos veces al día durante más de 10 días.
- **StrataCTX 50g** es suficiente para tratar un área de 36x15cm, dos veces al día durante más de 25 días.

Precauciones de uso

- Sólo para uso externo.
- StrataCTX no debe entrar en contacto con los ojos.
- StrataCTX no debe aplicarse sobre otros tratamientos de la piel sin la supervisión de su médico.
- StrataCTX puede manchar la ropa si no está completamente seco. Si esto ocurriera, lavado en seco es la opción recomendada para eliminar las manchas sin dañar el tejido.
- Para un almacenamiento correcto, vuelva a cerrar el tubo firmemente con la tapa.
- En caso de que su herida muestre signos de infección o no presente una mejora, consulte a su médico.
- En caso de irritación, interrumpa el uso de este producto y consulte a su médico.
- No es adecuado para heridas muy exudativas, heridas profundas o quemaduras de tercer grado.
- Mantener este producto fuera del alcance de los niños.
- No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en el tubo. La fecha de caducidad (EXP) no cambia una vez que se ha abierto el tubo.
- No utilizar si el tubo está dañado.

ESTÉRIL HASTA SU APERTURA

Composición: Polidimetilsiloxanes, siloxanes, alquilmethyl siliconas



Consult instructions for use
 Gebrauchsanweisung beachten
 Respecter le mode d'emploi
 Consultare le istruzioni per l'uso
 Consultar instrucciones de uso



Use by date
 Verfallsdatum
 Date limite d'utilisation
 Data di scadenza
 Fecha de caducidad



Batch code
 Seriennummer
 Numéro de lot
 Codice del lotto
 Código de lote



Sterilized using irradiation
 Durch Bestrahlung sterilisiert
 Stérile par irradiation
 Sterilizzato mediante irradiazione
 Esterilizado mediante irradiación



Do not use if the tube is damaged
 Nicht verwenden, wenn die Tube beschädigt ist
 Ne pas utiliser si le tube est endommagé
 Non utilizzare se il tubetto è danneggiato
 No utilizar si el tubo está dañado



Stratpharma AG
 Aeschenvorstadt 57
 CH-4051 Basel
 Switzerland / Schweiz / Suisse / Svizzera / Suiza

Date of preparation of this information
 Ausstellungsdatum dieser Information
 Date de dernière mise à jour des informations
 Data di revisione del testo
 Fecha de preparación de esta información
 07/2018